

# カラフル ポップ デンタル

Colorful POP Dental

## 取扱説明書・保証書

この度は当社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書・保証書をよくお読みになり理解されたうえで、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見ることができるよう必ず保管してください。

## 特長

- 毎分約38,000回以上の高速振動
- 3つのモード切り替え
- 自動電源オフ(30秒毎お知らせ機能付き)
- 高度な音波振動技術
- いつでもどこでも使えるパワフルでコンパクトなデザイン
- USB充電式のリチウムイオンバッテリー
- 1回の充電で約25日間使用可能(※)
- 歯に適切に接触するようにカットされたデュボン社製ブラシ



※使用可能時間は、2分間のブラッシングを1日2回行った場合の目安

## 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するためのもので、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を「警告」「注意」に区分して説明しています。

- 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負う事や、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

### 絵表示の例

- してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

### 警告

- 次の方は使用しないか、使用にあたり医師に相談してください。
  - 2ヶ月以内に口腔内の治療や歯茎の手術を受けた方
  - 使用した結果激しい出血があった方や、使用をはじめて1週間経っても出血が認められる方
  - ペースメーカーなどの体内埋め込み型医療機器を使用している方
  - 持病をお持ちの方や、健康上不安がある方

- P1 -

### 警告

- ブラシを他の人と共用しないでください。  
→ 病原菌への感染の原因になります
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 食器洗浄機や乾燥機、電子レンジなどで洗浄・乾燥させないでください。
- ① 感電やショート、発火の原因になるので次のことをお守りください。
  - 充電時以外は充電用ケーブルを取り外す
  - 水などの液体につけない
  - 浴槽や洗面台の流しなど水場のそばに置かない
  - 入浴やシャワーを浴びながら使用しない
  - 水が掛かる場所で使用・保管しない
  - 濡れた手でUSBケーブルを操作しない
  - 異常発熱や焦げ臭、動いたり動かなくなったりといった動作不良が見受けられる場合は使用を中止する


### 注意

- 歯や歯茎にブラシを強くあてたり1か所に長くあてすぎないでください。
- ブラシヘッドのプラスチック部分を歯や歯茎にあてないでください。
- 治療中の歯や不安定な入れ歯など、不安を感じる箇所に使用しないでください。
- 乳幼児や自分で操作できない方、口内の感覚が敏感な方・弱い方などは使用しないでください。
- 毛先が広がったブラシや毛先が潰れたブラシは使用しないでください。
- ① ブラシヘッドやブラシに破損やキズなどの異常が見られた場合は交換してください。
- ① ブラシに異常や摩耗が見受けられない場合でも3ヶ月毎にブラシヘッドを交換してください。
- ① USBケーブルを取り外す際はコネクタ部分を持って引き抜いてください。
- ① 本製品は歯、歯茎、舌の洗浄およびマッサージのために設計されているため、本来の用途以外に使用しないでください。
- ① お子様や、この取扱説明書の内容を正しく理解し実行できない方が使用する際は保護者の監督のもとで使用してください。
- ① 使用後は製品についた歯磨き粉をよく洗い落とすしてください。  
→ 歯磨き粉のホワイトニング成分などにより、樹脂部品が劣化する場合があります
- ① 必ず専用のブラシヘッドを使用してください。
- ① お子さまの手の届かない場所に保管してください。
- 火気のそば、高温多湿な場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。


- P2 -

## 付属品

箱の中に次のものが入っているかお確かめください

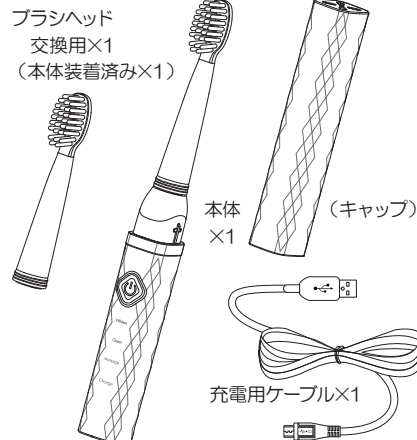


## 各部のなまえと機能

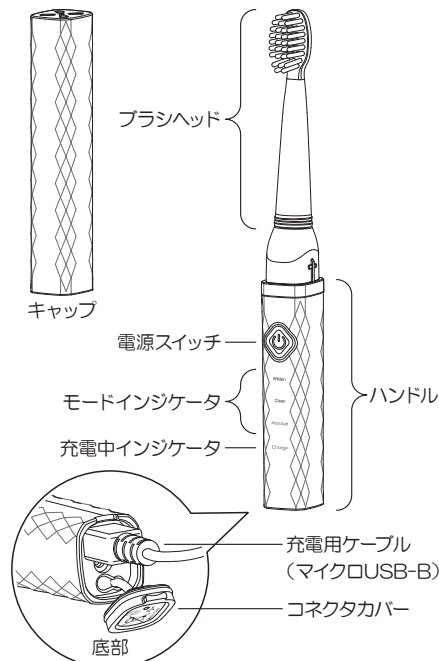

- P3 -

## 充電のしかた


カラフル ポップ デンタルをはじめて使用する際は、最初に充電する必要があります。

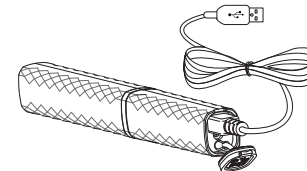

- ① 本体の底のコネクタカバーを開き、付属の充電用ケーブルのマイクロUSB-B端子を挿します。
- ② 充電用ケーブルのUSB端子を、USBアダプターやPCなどのUSBポートに挿します。
- ③ “充電中インジケータ”が消灯すると充電完了です。充電用ケーブルを抜き、本体の底のコネクタカバーを閉めてください。

はじめて充電する場合やバッテリーが空の状態から充電すると、充電完了までに約8時間かかります。

## ブラシヘッドの交換のしかた

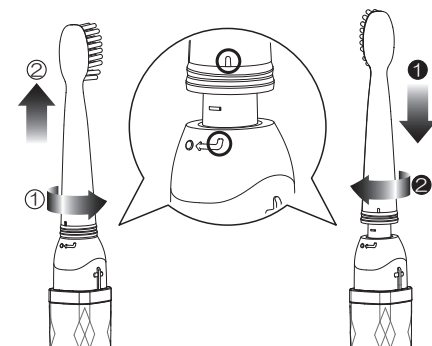

### ブラシヘッドを取り外す

- ① ブラシヘッドを本体に刻まれた矢印と反対向きに捻り、②引き抜きます。

### ブラシヘッドを取り付ける

- ① ブラシヘッドと本体の合わせマークの位置を確認して差し込み、②矢印の向きに捻って固定します。

ブラシに異常や摩耗が見受けられない場合でも3ヶ月毎にブラシヘッドを交換してください。

- P4 -

## 電源のオン／オフ

### 電源をオンにする

電源スイッチを押してください。

### 電源をオフにする

電源スイッチを押してから・・・

3秒以内  
電源スイッチを押すたびに

“Whiten”

↓  
“Clean”

↓  
“Massage”


↓  
“電源オフ”  
と、順次切り替わります。

### 3秒以上経過

電源スイッチを押すと電源が切れます。



### 自動電源オフ

電源を入れてから約2分間で自動的に電源が切れます。

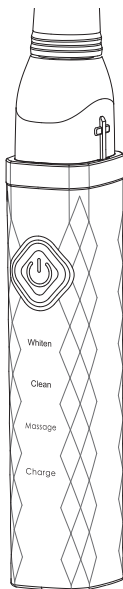

## モードの切り替え

電源を入れてから3秒以内に再度電源スイッチを押すと次の順でモードが切り替わり、選択中のモードを白色ランプの点灯でお知らせします。

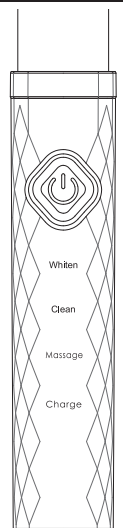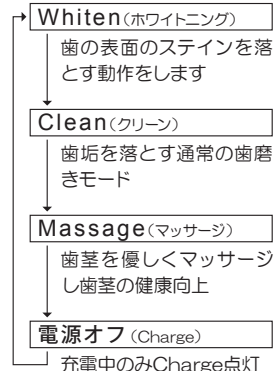


## ブラッシングのしかた

- 1 ブラシヘッドを水で湿らせ、歯磨き粉を付けます。
- 2 歯茎に対しておおそ45度の角度を保つようにしながら、ブラシの先を歯に優しくあてます。
- 3 電源スイッチを押し、ブラシの振動が歯に伝わるようにします。
- 4 全ての歯のすき間にブラシが届くように、そして歯茎全体をブラシでマッサージできるように、歯と歯茎に沿って、ブラシヘッドを前後にゆっくりと動かしながらブラッシングしてください。

最適な結果を得るため、ブラシは強く押しつけず、優しく押しあててください。

### 上手な歯のみがきかた

上あご

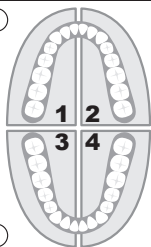

下あご

口の中を4つのブロックに分け、1ブロックに含まれる歯に対し30秒間歯磨きを行ないます。

カラフル ポップ デンタルは30秒ごとに一瞬停止して、歯磨きの目安時間をお知らせします。

30秒ずつ、4つのブロックすべてを正しくブラッシングし終えると2分間経過し、自動電源オフの時間と合致します。

### リチウムイオン電池のリサイクルに関して



**Li-ion**

ⓧ 一般家庭ごみとして破棄しないでください。  
破棄されたリチウムイオン電池が破壊されてショートすると、発火、発煙の原因になります。

## お手入れのしかた

### ブラシヘッド

- 使用後は毎回ブラシを濯いでください。
- 水気を振り落としてください。
- 1週間に一度、ブラシヘッドとの接続部をぬるま湯で濯いでください。

### 歯ブラシのクリーニング

- ブラシヘッドを取り外し、差し込み部分をぬるま湯で濯いでください。
- 水をつけ硬くしぼった清潔な布で、歯ブラシの表面全体を拭いてください。

### 保管のしかた

- 長期間使用しない場合は、充電用ケーブルを外し、本体およびブラシヘッドを手入れし、水気を十分に取り除いてから、直射日光のあたらない、涼しく乾燥した場所に保管してください。

## 故障かなと思ったら

お問い合わせいただく前に、下記項目をもう一度ご確認ください。

### 電源スイッチを押しても動かない

→ 充電が切れていることが考えられます。8時間以上充電してください。※P4の“充電のしかた”を参照

### 歯を磨いているときにチクチク／くすぐったく感じる

→ 音波振動のため、はじめて使ったときに“痒み”や“くすぐったさ”を感じることがありますが、この感覚は振動に慣れるに従い減少します。

### ブラシヘッドが歯に引っかかってしまう

→ ブラシヘッドを歯茎に向けて少し傾けてください。  
→ ブラシヘッドが歯に接触しないように角度を調整してください。

### 振動音が弱く感じる

→ 充電が弱っていることが考えられます。8時間以上充電してください。  
→ ブラシヘッドを交換してください。  
→ モードにより振動音が異なります。選択しているモードを確認してください。

## おもな仕様

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 品 名    | カラフル ポップ デンタル                            |
| 外形寸法   |                                          |
| 本 体    | 全長約188×幅約20×奥行約24mm<br>(キャップ除く、ブラシヘッド含む) |
| 充電ケーブル | 全長約1m                                    |
| 質 量    | 本体 約40g(キャップ除く、ブラシヘッド含む)                 |
| 定格電圧   | DC3.7V 260mAh                            |
| 振 動 数  | 約38,000回/分(無負荷状態)                        |
| 充電時間   | 約8時間                                     |
| 使用時間   | 約25日間<br>(2分間のブラッシングを1日2回行なった場合の目安)      |
| 使用充電電池 | リチウムイオン電池(Li-ion)                        |
| 消費電力   | 1W                                       |

## 保証書 カラフル ポップ デンタル

本書は、本書下記記載内容にて無料修理を行なうことをお約束するものです。お買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、必要事項を記入の上、修理をお申し付けください。

|       |            |
|-------|------------|
| 保証期間  | お買上げ日から6ヶ月 |
| お買上げ日 | 西暦 年 月 日   |
| お名前   | お電話番号      |
| ご住所   |            |
| ご購入店  |            |
| 故障内容  |            |

お問合せ先：デメテル株式会社

☎ 03-5911-1581 (平日10時～17時まで)  
〒171-0014 東京都豊島区池袋4-1-1サントスビル

お送りいただく前に、必ずご連絡の上修理の予約をお取りください。  
※約2週間以内にお送りいただいた場合、お受けできない場合がございます。

＜無料修理規定＞  
1. 正常な使用状態で保証期間内に製品が故障した場合には、当社に製品を送っていただくことで無料修理させていただきます。  
お送りいただく前に、必ずご連絡の上修理の予約をお取りください。※ご購入約2週間以内にお送りいただいた場合、お受けできない場合がございます。  
2. 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。  
○ 本書の提示が無い場合○ 本書にお買上げ日の記載がない場合または記載内容を書き換えたもの○ 保証期間中に発生した故障を保証期間終了後に修理依頼された場合○ 使用上の誤り(取扱説明書の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合含む)による故障・損傷○ 他社の機器から受けた障害または不当な修理・改造・分解による故障・損傷○ お買上げ後の移設・輸送・落下などによる故障・損傷○ 火災・地震・風水害・落雷その他天災や公害・虫害・ガス害、異常電圧などによる故障・損傷○ 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷○ 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部品の交換○ 消耗・摩耗・汚損したブラシヘッドの交換  
3. 故障の状況・その他事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。  
4. 本書に基づく無料修理(製品交換含む)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。  
5. 故障によりお買上げ製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。  
6. 本書は日本国内でのみ有効です。  
※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## 交換用ブラシヘッド 3本入

ご購入に関しましては下記電話までお問い合わせください。

☎ 03-5911-1581

平日 朝10時～夕方5時まで受け付け